



SafetyLancets



mylife™ SafetyLancets

Réduction du risque de blessures accidentelles par piqûre d'aiguille lors du prélèvement d'échantillons de sang capillaire

La conception innovante et brevetée des SafetyLancets mylife™ rend le prélèvement d'échantillons de sang capillaire facile et sûr. La fonction de libération unique et un capuchon de protection scellé assurent la sécurité et protègent les patients et les professionnels de la santé contre la contamination croisée et les blessures. Les lancettes mylife™ SafetyLancets sont disponibles en deux variantes différentes : mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) et mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

Caractéristiques de sécurité des deux produits

- Le sceau de sécurité indique si le mylife™ SafetyLancet n'est pas encore utilisé
- Le capuchon de protection préserve la stérilité et empêche la contamination avant l'utilisation
- Non réutilisable après utilisation grâce à la fonction de libération unique



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)


Caractéristiques de confort des deux produits

- La haute qualité de l'aiguille (pointe d'aiguille à triple biseau) favorise une bonne circulation sanguine avec un grand confort
- Aucun chargement ou assemblage requis avant l'utilisation




mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)


Comment utiliser le mylife™ SafetyLancet

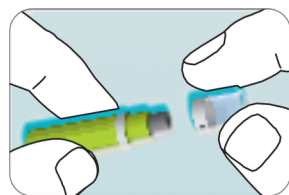


1 Il suffit de tourner le capuchon de protection et de le retirer du mylife™ SafetyLancet.

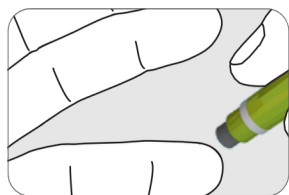

2 Placez la mylife™ SafetyLancet sur le bout du doigt.

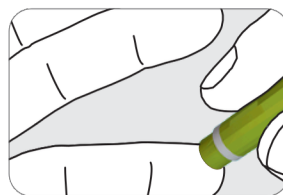

3 Appuyez fermement la plate-forme surélevée contre l'emplacement sélectionné pour activer le mécanisme de lancette.

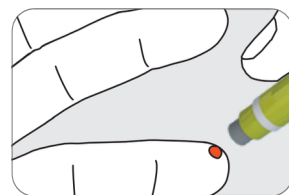

4 L'aiguille rebondit immédiatement après utilisation. Grâce à la fonction de déclenchement unique, le mylife™ SafetyLancet ne peut pas être réutilisé accidentellement.



Liberté. Confiance. Avec mylife™.

Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

MTD

Medical Technology and Devices



SafetyLancets



mylife™ SafetyLancets

Lancettes de sécurité stériles à usage unique pour un prélèvement de routine sûr et pratique d'échantillons de sang médical

Disponible en paquets de 200 pièces avec un couvercle coulissant pratique



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

Pour contrôler la glycémie et pour d'autres tests diagnostiques

- Centres d'excellence sur le diabète
- Hôpitaux
- Soins à domicile
- Maisons de retraite
- Pratiques

La stérilité est maintenue pendant 5 ans

- Stérilisé par irradiation
- Dose de stérilisation spécifiée selon la norme ISO 11137

Jauge	Aiguille Diamètre	Profondeur de perforation	Description	Contenu	Article	PZN DE
28G	0,36 mm	1,5 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets	200 St.	700024003	9123827
30G	0,30 mm	1,2 ± 0,2 mm	mylife™ SafetyLancets Comfort	200 St.	700023989	11286117

700006499/10033962-FR/V01

mylife™ est une marque sous licence pour les aiguilles de stylo et la mesure de la glycémie.

Allemagne, Autriche, Suisse

Medical Technology and Devices
 THE SQUAIRE 12, Am Flughafen,
 60549 Frankfurt am Main
 CustomerService.DACH@groupmtd.com <https://mtdglobal.com>



MTD

Medical Technology and Devices