

Discofix® C



Der arzneimittelbeständige Dreiwegehahn mit Rotationsadapter



Infusionszubehör

DEHP-frei

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Machen Sie keine Zugeständnisse ...



Kennen Sie die Situation?

Undichtigkeiten an Dreiwegehähnen stören die Infusionstherapie und können Ihre Patienten gefährden. Es kann zu einer Unterversorgung mit lebensnotwendigen Medikamenten, Luftembolien oder mikrobiellen Kontaminationen kommen.

B. Braun bietet als einziger Hersteller einen arzneimittelbeständigen Dreiwegehahn an, der über die gesamte Standzeit des Infusionsregimes den Lösungsfluss zuverlässig steuert. Dies wurde durch eine unabhängige Prüfung des TÜV München bestätigt.



Eine neue Generation von Dreiwegehähnen und Hahn- bänken erfüllt die Anforderungen einer fortschrittlichen Infusionstherapie

Discofix® C – eine Kombination aus einem innovativen Material und mehr als 20 Jahren Erfahrung von B. Braun. Die Spannungsrissbeständigkeit des Discofix® C unter Einwirkung der verschiedenen heute verwendeten Arzneimittel ist einzigartig.

Discofix® C – komfortable Handhabung und herausragende Sicherheit gehören zusammen

Ob beim Anschluss eines Dreiwegehahnes an eine Venenverweilkanüle, einen zentralvenösen Katheter oder die Verbindung mit einem Infusionssystem – alle Konnektionen und Befestigungen können Sie zeitsparend und einfach durchführen.

... fordern Sie den spannungsrisssbeständigen Dreiwegehahn




Discofix® C – einzigartiger Handhabungskomfort und ein Plus an Sicherheit

Ob bei der Konnektion des Dreiwegehahns an eine Venenverweilkanüle oder an einen ZVK, ob bei der Integration einer Hahnbank in ein Infusionssystem – wichtig ist vor allem, dass alle Verbindungen und Einstellungen leicht und schnell vorgenommen werden können. Bei allen Handhabungsvorgängen müssen Sie sich auf eine sichere, dichte Verbindung verlassen können. Diese Anforderungen wurden im Design von Discofix® C umgesetzt.

Ihre Vorteile im Überblick

- Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn – für mehr Sicherheit in der Infusionstherapie
- Undichtigkeiten und die daraus möglicherweise resultierenden Gefährdungen für Patient und Anwender werden verhindert
- Schnelle und sichere Konnektionen – zuverlässige Verbindung auch bei langfristiger Anwendung
- Problemloser Zugang durch den Rotationsadapter bei Injektionen und Aspirationen
- Der Klick-Mechanismus – spürbares Einrasten und exakte Positionierung des Kükens in 45°-Position

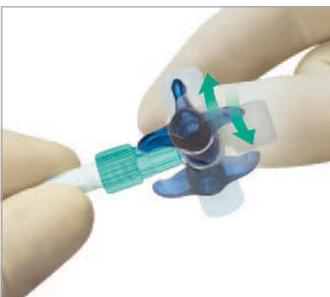

Die drehbare Lock-Überwurfmutter ermöglicht eine schnelle und einfache Konnektion und gewährleistet eine zuverlässige und sichere Systemverbindung.



Nach erfolgter Konnektion bleibt der Discofix® C-Hahn durch den Rotationsadapter um seine eigene Achse drehbar. Damit werden Injektionen und Aspirationen spürbar leichter durchgeführt, da Sie den Dreiwegehahn in die günstigste Position drehen können. Ein unbeabsichtigtes Lösen der Überwurfmutter wird verhindert.



Nutzen Sie die deutlich spürbare Klick-Funktion in 45°-Schritten für die exakte und komfortable Einstellung des Dreiwegehahnes.

„Sicherheit wird spürbar – bis in die Fingerspitzen.“

Discofix® C: Ihre erste Wahl

Produktprogramm	Ausführung	Verkaufseinheit/ Stück	Art.-Nr.
	Dreiwegehahn, blau, mit Rotationsadapter	200	16494 C
	Dreiwegehahn, weiß, mit Rotationsadapter	200	16495 C
	Dreiwegehahn, rot, mit Rotationsadapter	200	16496 C
	Dreiwegehahn, gelb, mit Rotationsadapter	200	16497 C
	Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 10 cm	200	16500 C
	Dreiwegehahn, weiß, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 10 cm	200	16501 C
	Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 25 cm	50	16520 C
	Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 50 cm	50	16540 C
	Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 75 cm	50	16551 C
	Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 100 cm	50	16560 C
	Hahnbank 3-fach, blau, einzeln steril	50	16605 C
	Hahnbank 3-fach, b/g/r, einzeln steril	50	16600 C
	Hahnbank 3-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung, 150 cm	50	16615 C
	Hahnbank 3-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung und endständigem Dreiwegehahn, 150 cm	50	16610 C
	Hahnbank 3-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung und endständigem Dreiwegehahn, 180 cm	50	16611 C
	Hahnbank 5-fach, blau, einzeln steril	40	16609 C
	Hahnbank 5-fach, br/gr/w/g/b, einzeln steril	40	16608 C
	Hahnbank 5-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung, 150 cm	40	16612 C
	Hahnbank 5-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung und endständigem Dreiwegehahn, 150 cm	40	16613 C

Latexfrei – DEHP-frei