



Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch

Etac Clean

Etac Clean wird Sie nicht nur funktionell überzeugen – auch für sein Design ist der Duschstuhl gleich mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet worden. Womit sich erneut zeigt, dass ein Produkt mit hoher Funktionalität zugleich attraktiv sein kann.

Auf einen Blick!

- Nach hinten offene Sitzfläche bietet optimale Erreichbarkeit bei der Hygiene
- Abschwengbare Armlehnen erleichtern den Transfer
- Wahlweise in grün oder grau erhältlich
- Höhenverstellbare Fußplatte kann unter den Sitz geschoben und verstaut werden
- Optionaler Softsitz oder -rücken erhöht den Komfort
- 24"-Antriebsräder sind einfach nach-rüstbar – und umgekehrt

Distributed by





puras

031 996 85 85
puras.ch



ROHO® Clean-Protect Kissen*

Clean ist auch mit einem ROHO-Kissen ausstattbar.

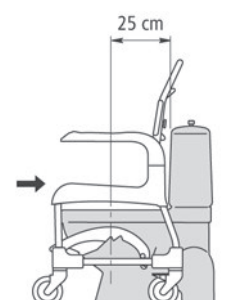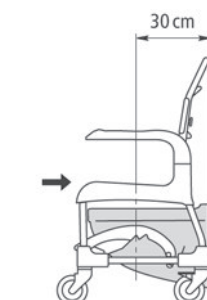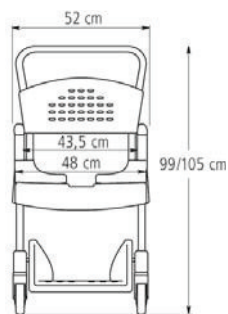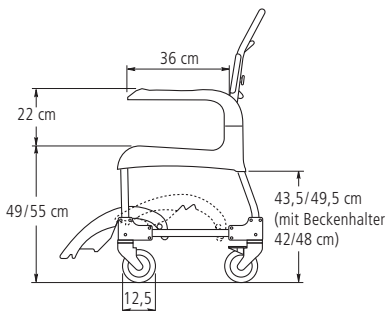

Artikel

Artikel	Art.-Nr.
Etac Clean SH 49 cm, 2 arretierbare Räder, grün	8020 9213
Etac Clean SH 55 cm, 2 arretierbare Räder, grün	8020 9214
Etac Clean SH 49 cm, 2 arretierbare Räder, grau	8020 9273
Etac Clean SH 55 cm, 2 arretierbare Räder, grau	8020 9274

Abmessungen

Gesamtbreite:	52 cm
Sitzbreite:	48 cm
Breite zwischen den Armlehnen:	43,5 cm
Ausschnitt:	21 x 37 cm

Material

Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Sitz/Rückenlehne/Armlehnen/Fußplatte aus Polypropylen, Radbefestigung aus Polyamid, Räder aus Polyamid/TPE (arretierbar, kugelgelagert)

Gewicht

Gewicht	HMV-Nr.
14 kg	18.46.03.1025 (SH 49 cm)
	18.46.03.1026 (SH 55 cm)



Lösungsmittelfreies Reinigungsmittel mit einem PH-Wert von 6–9 oder mit einer 70%tigen Desinfektionslösung. Dekontamination bei max. 85°C. Regelmäßige Reinigung und Funktionskontrolle der Räder.