

Sichtschutz Systeme

Gesundheitswesen | 2025



Distributed by

puras

031 996 85 85
puras.ch

ropimex[®]
Seit 1976



Besuchen Sie
unseren
virtuellen Showroom



Scannen



ropimex® HyGentle: Produktdesign und Materialkomposition für ein Höchstmaß an Hygiene

Produktdesign:

Hygiene beginnt mit der Konstruktion. Ecken, Winkel oder für die Reinigung und Desinfektion ungünstige Geometrien werden soweit wie möglich vermieden.

Materialkomposition:

Die Reinigungs-/Desinfektionsfähigkeit der zur Herstellung des Produktes erforderlichen Materialien steht bei deren Auswahl im Vordergrund. Ziel ist die Verbesserung der Reinigung und die Reduzierung der mikrobiologischen Belastung. Poröse, saugende Oberflächen gilt es zu vermeiden.

Reinigung und Desinfektion:

Wir testen und dokumentieren die Materialien unserer Produkte auf deren naturgemäße Verkeimung. Ebenso dokumentieren wir die Reinigbarkeit und Desinfizierbarkeit mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

CE - Medizinprodukt

ropimex®-Produkte entsprechen den Anforderungen an die regulatorischen Vorgaben für Medizinprodukte.



Teleskope, Teleskoparme
RTS, RTI..... 4 - 13

Teleskophalterungen
WH..., GSH... ..14 - 15

Mobilschirme FG95..... 16 - 17

Vario-Schienensystem RVS..... 18 - 21

Vorbänge
RTX, VHC, CQ, Z22 - 25

Faltvorhang ropiCARE26 - 27

Faltwände RFW..... 28 - 35

Butterfly Faltwand RBF 36 - 39

Butterfly Paravent RBP40 - 41

Paravents RLP..... 42 - 45

Teleskopkabine RKLE...,
Duschspritzschutz RD... .. 46 - 47

Wir über uns / Zertifikate.....48 - 51

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015 und
DIN EN ISO 14001:2015



Teleskope

Über Sachen, die an der Wand hängen, kann man nicht stolpern. Darum ropimex®-Teleskope. Die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird. Nach Gebrauch einfach zusammenschieben und zur Wand drehen. Sie finden wieder Ihr gewohntes Raumbild vor.

Bis max. 210 cm
Modell RTS:
schwenkbar



Bis max. 220 cm
Modell RTI:
abknickbar und
schwenkbar




Ab 220 cm
Modell RTH:
mit Haken und
Deckenstütze




CE

Teleskope

Optimiert in Handhabung, Reinigung und Desinfektion

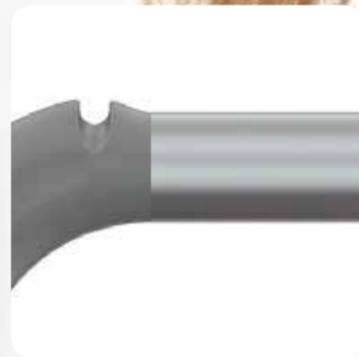


Glatte Teleskoprohre und Rundungen für eine hygiene-freundliche Oberfläche.

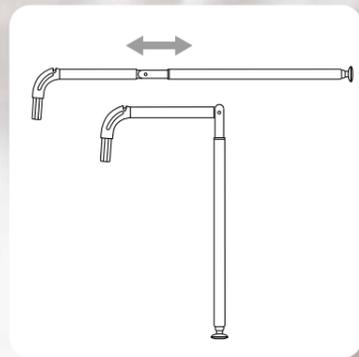

Modell RTI: Abnickmechanik nahtlos integriert.



Bei Belastung klinken sich die Vorhangringe aus den Ösen der Vorhänge aus und vermeiden somit Verletzungen und Beschädigungen am System.

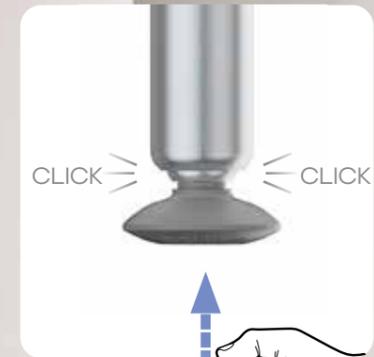

Endstück mit Arretierung – fixiert Teleskop in Ruhestellung



Teleskop Modell RTS - schwenkbar



Teleskope Modell RTS - schwenkbar




ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



| Modell | Teleskopauszug | Gewicht |
|---------|--|---------|
| RTS 1.2 | 55 cm → 120 cm  | 0,5 kg |
| RTS 1.5 | 65 cm → 150 cm  | 0,6 kg |
| RTS 2.1 | 85 cm → 210 cm  | 0,7 kg |

Vorhangringe im Lieferumfang enthalten

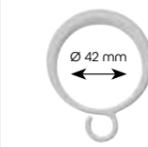

Vermeidet Schäden: bei Belastung klinken sich die Ringe aus den Ösen der Vorhänge aus.

Wand-/Geräte-schienenhalter siehe Seite 14



Empfohlene Vorhänge siehe ab Seite 22

RTX ropitex



CQ Cleanique

VHC staph CHEK



Teleskop Modell RTI - abknickbar und schwenkbar



Teleskope Modell RTI - abknickbar und schwenkbar



ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



| Modell | Teleskopauszug | Gewicht |
|---------|---|---------|
| RTI 1.3 | 70 cm → 130 cm  | 0,6 kg |
| RTI 1.6 | 80 cm → 160 cm  | 0,7 kg |
| RTI 2.2 | 100 cm → 220 cm  | 0,8 kg |

Vorhangringe im Lieferumfang enthalten



Vermeidet Schäden: bei Belastung klinken sich die Ringe aus den Ösen der Vorhänge aus.

Wand-/Geräte-schienenhalter
siehe Seite 14



Empfohlene Vorhänge siehe ab Seite 22

RTX ropitex




CQ Cleanique

VHC staph CHEK




Teleskop Modell RTH - abknickbar und schwenkbar mit Haken

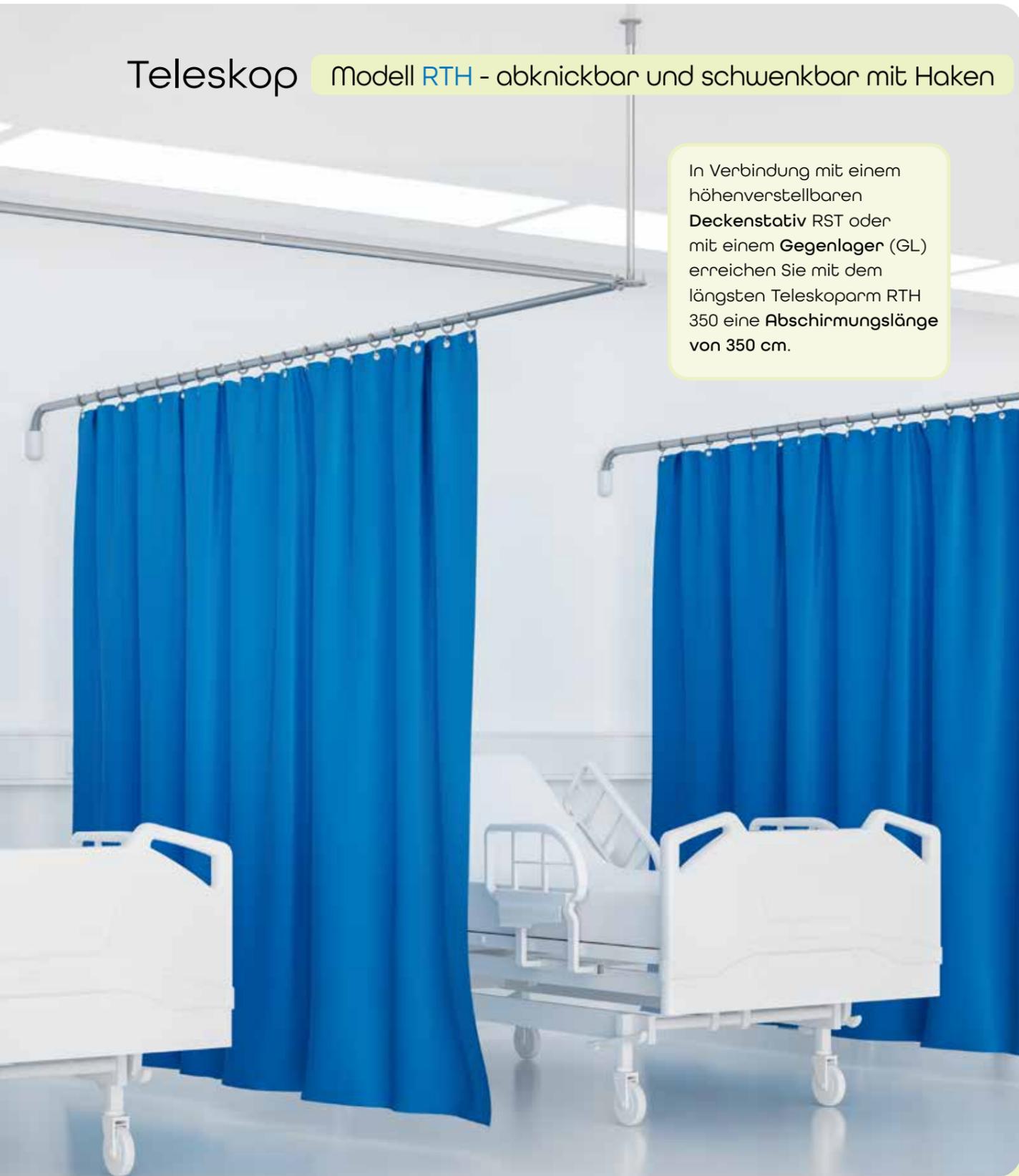

In Verbindung mit einem höhenverstellbaren **Deckenstativ RST** oder mit einem **Gegenlager (GL)** erreichen Sie mit dem längsten Teleskoparm RTH 350 eine **Abschirmungslänge von 350 cm**.

Teleskope Modell RTH - abknickbar und schwenkbar mit Haken

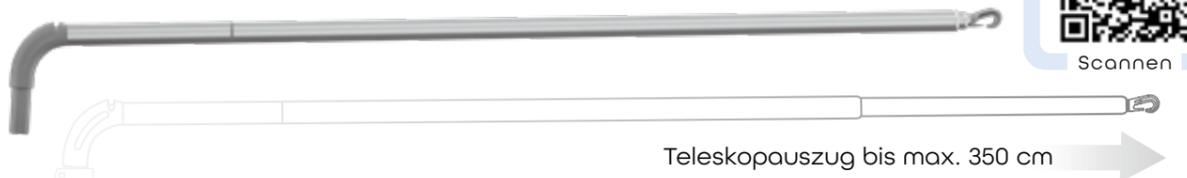

Für Montage Frei im Raum: Deckenstativ

Für Montage Wand zu Wand: Gegenlager

ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

| Modell | Teleskopauszug | Gewicht | Im Lieferumfang enthalten |
|---------|--|---------|--|
| RTH 300 | 300 cm mit Haken am distalen Ende 142 cm → 300 cm | 1,0 kg | Wandhalter WH 95 |
| RTH 350 | 350 cm mit Haken am distalen Ende 152 cm → 350 cm | 1,1 kg | Vorhangringe VR Gegenlager GL |

Modell RST - verstellbare Deckenstative

| Modell | Auszug | Raumhöhe von - bis |
|---------|--------------|--------------------|
| RST 4 | 45 - 75 cm | 245 - 275 cm |
| RST 8 | 75 - 135 cm | 275 - 335 cm |
| RST 10* | 110 - 200 cm | 335 - 400 cm |



Die glasfaserverstärkte Polyamidscheibe am unteren Ende des Deckenstatives dient zur Aufnahme der Haken der Teleskoparme, Modelle RTH

*ohne Abbildung

waschbar
 Oberflächen desinfizierbar
 mit Wasserdampf desinfizierbar
 mit Vaporisator desinfizierbar
 nachhaltig reparierbar

Teleskophalterungen

Modell **WH** - Wandhalterungen

Modell **GSH** - Halterungen für Geräteschienen



WH: Wandhalterungen für Teleskope



| Modell | | Maße |
|----------|---|-----------------------------|
| WH 95 | Wandhalter für alle Teleskope, Alu-Druckguss, Schrauben verdeckt, justierbar zum Ausgleich von Wandunebenheiten, Farbbeschichtet, Farben weiß (RAL 9010), signalgrau (RAL 7004) | Höhe 10 cm Breite 6 cm |
| WH 95 PL | Für Wände mit geringer Festigkeit z. B. Gipskartonplatten. Wandhalter für alle Teleskope, weiß oder signalgrau, Schrauben verdeckt, montiert auf Plexiglasscheibe 20/15 cm | Höhe 15 cm Breite 20 cm |
| WH | Wandhalter für alle Teleskope | |
| WH/LA | Wandhalter zur Überbrückung von Versorgungskanälen bis 15 cm | Höhe 16,5 cm Breite 6 cm |
| WH/F | Wandhalter mit Kordelschraube | |

GSH: Teleskophalterungen für Geräteschienen




| Modell | | Maße |
|--------|--|-----------------------------|
| GSH/95 | Teleskophalter für Geräteschienen, Neigung justierbar | Höhe 10 cm Breite 6 cm |
| GSH/N | Teleskophalter für Geräteschienen, wandgestützt, höhenverstellbar | Höhe 55 cm Breite 5 cm |
| GSH/DK | Teleskophalter mit „Doppelklaue“ für Geräteschienen, höhenverstellbar | Höhe 55 cm Breite 5 cm |
| GSH/F | Teleskophalter für Geräteschiene 25/10 mm, Befestigung mittels Klemmschraube | Höhe 13,5 cm Breite 4 cm |

Mobilschirm Modell FG95



FG95 Fahrgestell

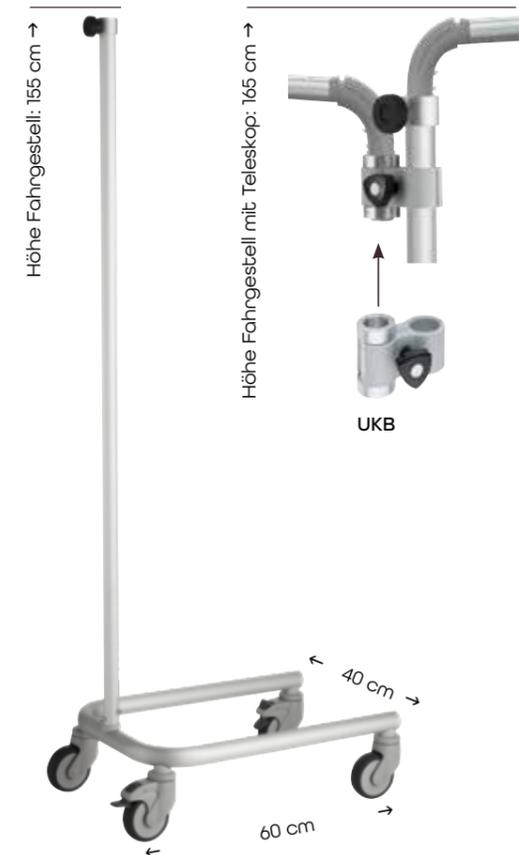

Modell

| | |
|------|---|
| FG95 | Fahrgestell , 155x60x40 cm (H/T/B), 4 Rollen ø 100 mm, 2 Rollen davon feststellbar. Aluminium eloxiert, glasfaserverstärktes Polyamid, korrosionsgeschützt, desinfizierbar. In das Fahrgestell FG 95 können alle Teleskope der Modellreihe „RTI“ eingesetzt werden. |
| LA | Elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis. |
| UKB | Universalklaue zur Aufnahme eines zweiten Teleskops. Nur mit RTI 1.3 oder RTI 1.6. |

Teleskop Modell RTI



Wir empfehlen folgende Ausstattung

Mit einem Teleskop

| | |
|---------|------------------------------------|
| RTI 2.2 | Teleskop abknickbar, Auszug 220 cm |
|---------|------------------------------------|

Mit zwei Teleskopen und UKB-Klaue

| | |
|---------|---|
| RTI 2.2 | Teleskop abknickbar, Auszug 220 cm (nicht für die UKB-Klaue geeignet) |
| RTI 1.6 | Teleskop abknickbar, Auszug 160 cm |
| RTI 1.3 | Teleskop abknickbar, Auszug 130 cm |

Empfohlene Vorhänge
siehe Seite ab Seite 22

RTX ropitex



CQ Cleanique VHC staph CHEK



Vario Schienensystem modell RVS



Vario Schienensystem RVS:
Ein System – jede Menge Möglichkeiten!
Schräge Wände? Spitze Winkel?
Kein Problem!

Wir liefern Wandanschlüsse, die sich stufenlos um bis zu 180 Grad verstellen lassen – und jede Asymmetrie in der Architektur ausgleichen. Umzug oder Renovierung – das Schienensystem ist so konzipiert, dass es sich jederzeit neuen Anforderungen anpasst.

- schnell montiert
- mega-variabel
- langlebig



Empfohlene Vorhänge siehe ab Seite 22


RTX ropitex



VHC staph CHEK



CQ Cleanique

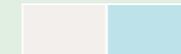


Vario Schienensystem Modell RVS



Einfache Bestellung: Skizze genügt!

Erstellen Sie einfach eine handgezeichnete, vermaßte Skizze der gewünschten Raumaufteilung, tragen Sie die Breiten- und Längenmaße ein und geben Sie die Raumhöhe und die gewünschte Durchgangshöhe an.

Wir stellen Ihnen das System komplett zusammen.

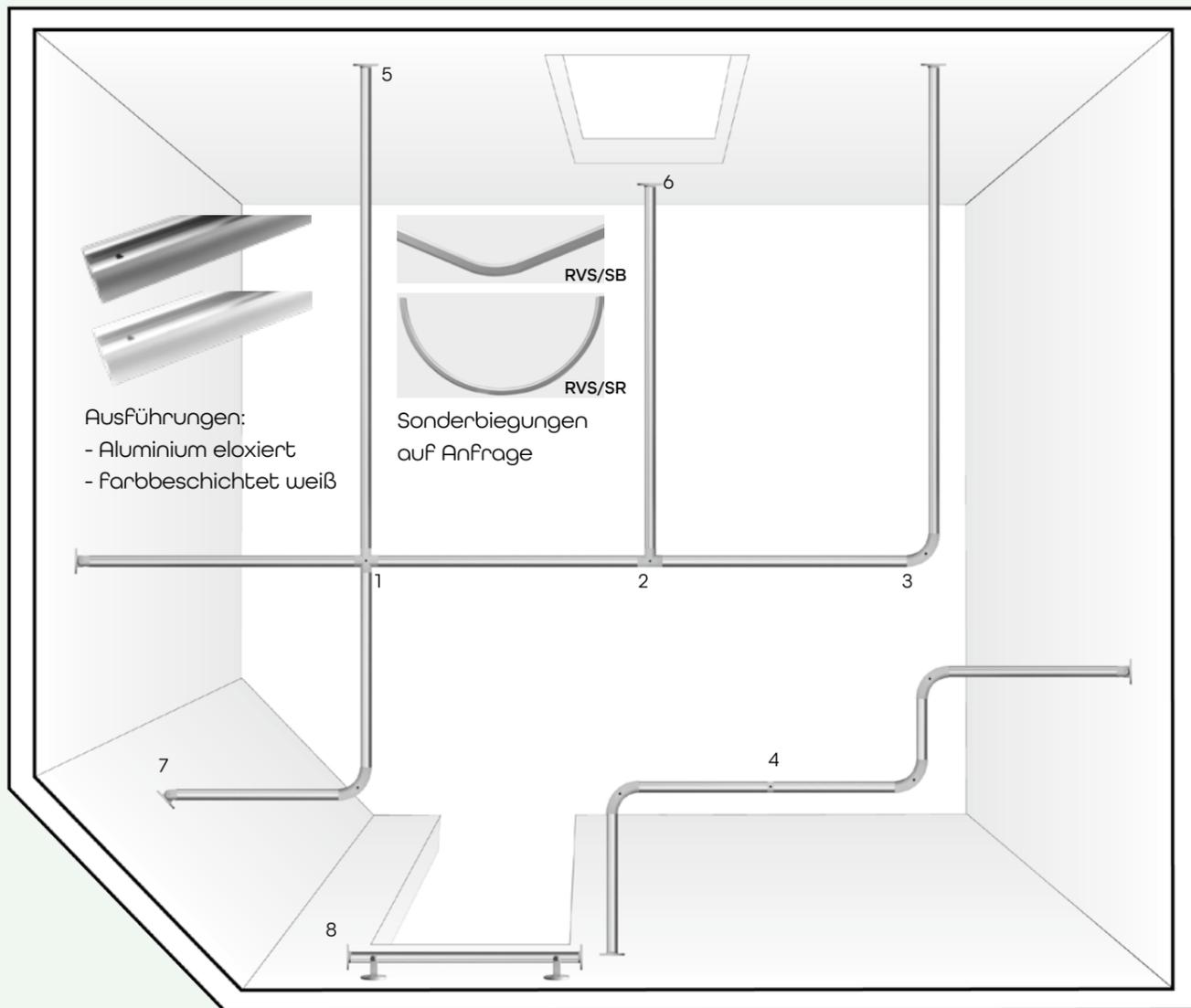

Ausführungen:
- Aluminium eloxiert
- Farbbeschichtet weiß

Sonderbiegungen
auf Anfrage
RVS/SB
RVS/SR



Vorhangring RVS/VR
aus unzerbrechlichem
Polyamid: Klinkt sich
bei Überlast (ca. 2 kg)
aus der Vorhangöse.



Ringstopper: Zur Fixierung
des ersten Ringes oder als Ringstopper



**Silikonabdeckprofil
RVS/AP**

Mit den RVS-Verbindern schaffen Sie Kabinen nach Wunsch

1
Kreuzverbinder
(RVS/KV)

2
T-Verbinder
(RVS/TV)

3
Bogenverbinder
RVS/BV
(Radius 60 mm)

4
Nachträglich verändern:
einfach Profilrohr
trennen und Verbinder
Ihrer Wahl einbauen,
z. B. Linienverbinder
RVS/LV

RVS-Wandanschlüsse - für jede Anforderung

5
Frei im Raum endend:
Endkappe RVS/EK
stoppt den Vorhang.

6
Gerade an die Wand:
Wandanschlussstück
RVS/WA

7
Schräge Wände, spitze Winkel:
der Vario-Wandanschluss RVS/WAV gleicht Asymmetrien
bis 180° aus sowie Längendifferenzen bis +/- 5 mm.

Flexibel an die Decke - RVS Deckenanschlüsse

8
Montage direkt unter der Decke:
mit Deckenhalter RVS/DH (Abstand OK
Decke bis UK Schiene
ca. 6 cm).

Problemlos über Stürze: z. B. bei
Fenstern oder
Türen mit dem
Wandanschluss
RVS/WAS

Abhängung auf Durchgangshöhe:
mit der verstell-
baren Decken-
stütze (+/- 2 cm)
RVS/DS

**Für frei im Raum
endende RVS-Schienen:**
verstellbare
Doppeldeckenstütze
(+/- 2 cm) RVS/DDS

Abdeck-
kappe für
Odenwald-
decken

RVS/DSPL

Optional:
Verstärkungs-
scheibe für
Deckenstativ
bei z. B. Gips-
kartondecken

Verankerung an Profilschiene:
mittels Vierkantschraube auf der
ganzen Strecke möglich; für
verstellbare Deckenstütze RVS/DS
oder mit Deckenhalter RVS/DH.
Max. Abstand: 2 m.

Verankerung über alle Verbinder:
Serienmäßige Gewindebohrung
zum Einschrauben der verstellbaren
Deckenstütze RVS/DS oder des
Deckenhalters RVS/DH gibt sicheren
Halt.

Abstandhalter:
RVS/AH für Bogen
und T-Lösung.

Vorhänge



RTX: ropitex BIOACTIVE der neue ropimex®-Vorhang für die Station aus 100 % bioaktiver Polyester-Faser



- Warenbreite: 210 cm
- Warengewicht: 140 g/m²



Größentabelle

| | Breite | Höhe in cm |
|---------|--------|------------|
| RTX 110 | 110 | 175 |
| RTX 121 | 140 | 120 |
| RTX 122 | 140 | 140 |
| RTX 123 | 140 | 175 |
| RTX 151 | 170 | 120 |
| RTX 152 | 170 | 140 |
| RTX 153 | 170 | 175 |
| RTX 200 | 200 | 175 |
| RTX 211 | 230 | 120 |
| RTX 212 | 230 | 140 |
| RTX 213 | 230 | 175 |
| RTX 215 | 250 | 175 |
| RTX 217 | 270 | 175 |
| RTX 300 | 300 | 175 |
| RTX 330 | 330 | 175 |
| RTX 360 | 360 | 175 |
| RTX 390 | 390 | 175 |
| RTX 420 | 420 | 175 |
| RTX 460 | 460 | 175 |
| RTX 500 | 500 | 175 |

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Lieferbar in 11 Farben



Schwerentflammbare Vorhänge können Leben retten!



VH/C: ropimex®-Vorhänge aus staph CHEK für Station und Nasszelle



- Warenbreite: 180 cm
- Warengewicht: 330 g/m²




Größentabelle

| | Breite | Höhe in cm |
|----------|--------|------------|
| VH/C 121 | 140 | 120 |
| VH/C 122 | 140 | 140 |
| VH/C 151 | 170 | 120 |
| VH/C 152 | 170 | 140 |
| VH/C 211 | 220 | 120 |
| VH/C 212 | 220 | 140 |


Sonderanfertigungen auf Anfrage

- Pflegeanleitung

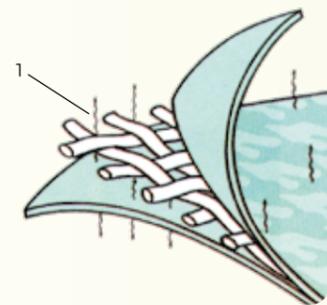

1. Dauerhaft eingebettet: aktive antibakterielle Komponenten

Lieferbar in 5 Farben

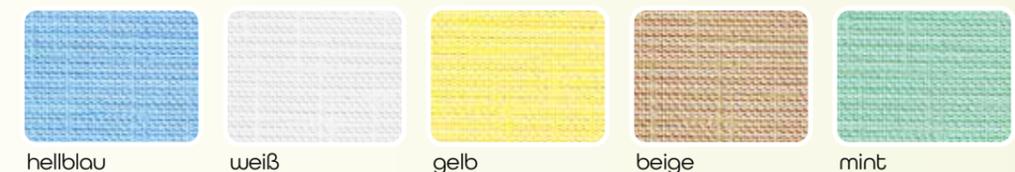



Cleanique®

CQ: ropimex®- nahtfreier Hygienevorhang aus thermoplastischem Polyether-Polyurethan für Station und Nasszelle

- Warenbreite: 190 cm
- Warengewicht: 270 g/m²




Größentabelle

| | Breite | Höhe in cm |
|--------|--------|------------|
| CQ108 | 100 | 80 |
| CQ128 | 120 | 80 |
| CQ121 | 140 | 120 |
| CQ122 | 140 | 140 |
| CQ123 | 140 | 170 |
| CQ151 | 170 | 120 |
| CQ152 | 170 | 140 |
| CQ153 | 170 | 140 |
| CQ211 | 220 | 120 |
| CQ212 | 220 | 140 |
| CQ213 | 220 | 170 |
| CQ1220 | 120 | 190 |
| CQ1420 | 140 | 190 |
| CQ1620 | 160 | 190 |
| CQ1820 | 180 | 190 |
| CQ2020 | 200 | 190 |
| CQ2220 | 220 | 190 |
| CQ2420 | 240 | 190 |
| CQ2720 | 270 | 190 |
| CQ3020 | 300 | 190 |
| CQ3320 | 330 | 190 |

- Pflegeanleitung
- sowie desinfizierbar auf der Oberfläche



Lieferbar in 2 Farben

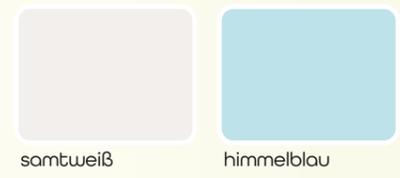

Sonderanfertigungen auf Anfrage

ZEROTEX



ZEROTEX

ropimex® Zerøtex - non-woven aus 100 % Polypropylen (PP). Spart Zeit und Kosten

- Warenbreite: ca. 210 cm
- Warengewicht: 70 g/m²



Passend für ropimex-Teleskope RTS und RTI sowie das RVS Schienensystem



Größentabelle


| Breite x Höhe in cm | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| passend für | | |
| Z1516 | RTS 1.2 | 150 x 160 |
| Z1517 | RTI 1.3 | 150 x 175 |
| Z1816 | RTS 1.5 | 180 x 160 |
| Z1817 | RTI 1.6 | 180 x 175 |
| Z2116 | RTS 2.1 | 210 x 160 |
| Z2117 | RTI 2.2 | 210 x 175 |

Mindestabnahme 10 Stück / pro Farbe und Größe.

Lieferbar in 5 Farben



Faltvorhang **ropicare**

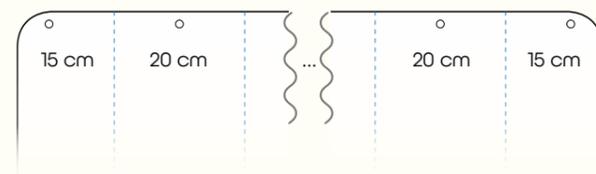

Lamellenbreite: 20 cm,
Anfang- und Schlusslamelle: 15 cm



Nur in Verbindung mit ropimex® Vario Schienensystem RVS.
● Farbbeschichtet weiß (siehe S. 18 - 21)



ROC: ropimex®- Faltvorhang aus PVC/Polylestergewebe.
Einfache Pflege - ohne zu waschen



- Warenbreite: 180 cm
- Warengewicht: 570 g/m²



- schwerentflammbar
- Flüssigkeitsdicht
- langlebig
- recycelbar
- **Pflegeanleitung**
 desinfizierbar auf der Oberfläche

Größentabelle

| | Breite | Höhe in cm |
|---------|--------|------------|
| ROC 110 | 110 | 175 |
| ROC 130 | 130 | 175 |
| ROC 150 | 150 | 175 |
| ROC 170 | 170 | 175 |
| ROC 190 | 190 | 175 |
| ROC 210 | 210 | 175 |
| ROC 230 | 230 | 175 |
| ROC 250 | 250 | 175 |
| ROC 270 | 270 | 175 |
| ROC 290 | 290 | 175 |
| ROC 310 | 310 | 175 |



Optional mit einem, auf die gesamte Vorhangbreite ausgelegten durchsichtigen Bereich erhältlich.

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Lieferbar in 8 Farben

| | | | |
|------|------------|----------|--------|
| | | | |
| Weiß | champagner | hellgrau | orange |
| | | | |
| gelb | carambola | hellbau | türkis |

Vorhangring ROC/VR
Passend für ropimex® Vario-Schienensystem RVS. Erlaubt ein vollständiges Zusammenschieben des Faltvorhanges (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ringstopper RVS/RS
zur Fixierung eines Vorhangringes am Anfang oder am Ende der Schiene

Faltwand RFW - wandmontiert



Füllmaterial:
blickdicht
aber licht-
durchlässig

blickdichte,
360°
Scharniere

10 JAHRE
Garantie
auf
Scharniere

Die robuste und stoßfeste Faltwand ist blitzschnell in Position gebracht und nach Gebrauch wieder an der Wand geparkt.

Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Füllmaterial in hochwertigem Aluminiumprofil schafft eine freundliche, helle Atmosphäre.

Eine individuelle Note erhält die Faltwand durch moderne Flügel designs, die in verschiedenen Farben gestaltet werden können.




Faltwand RFW wandmontiert



Faltwand RFW zur Wandmontage

| | |
|-----------------|--|
| Flügelbreite | 30 cm |
| Höhen | 145 / 165 / 185 cm |
| Gewicht | 3,00 / 3,50 / 4,00 kg / Flügel |
| Rahmen | Rahmen- und Scharnierprofile: strang- gepresstes Aluminium (Al Mg Si 05), eloxierte Oberfläche, Verbindungsschrauben: V2A Edelstahl, nichtrostend |
| Kunststoffteile | PA 6 GF 15, Polyamid mit 15 % Glasfasern |
| Füllplatten | Polycarbonat 2 mm, weiß transluzent, schwerentflammbar, Baustoffklasse DIN EN13501-1, B-s1 d0, extrem schlagzäh |
| Pflege | handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel |

| Abschirmung | offene Breite | |
|-------------|------------------|--|
| 3-Flügelig | 90 cm | |
| 4-Flügelig | 120 cm | |
| 5-Flügelig | 150 cm | |
| 6-Flügelig | 180 cm | |
| 7-Flügelig | 210 cm | |
| 8-Flügelig | 240 cm | |
| 9-Flügelig | 270 cm | |
| 10-Flügelig | 300 cm | |

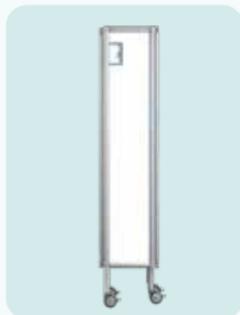

Blickdichte 360° Scharniere.
Die RTC-Einheit
(ropimex®-Turn & Connect)
ermöglicht Flügeldrehungen
von 360°.

29 Farben
21 Designs
siehe Seite 34-35



Faltwand RFW Zubehör



Abstandhalter-
Set RFW-WA

Abstandhalter-Set (2 Stück) für Wandbefestigung,
Standardabstand 100 mm,
Sonderlänge nach Maßangabe bis 400 mm möglich



Klauenset
RFW-KLS

Klauenset (2 Stück) zur Befestigung an
doppelläufiger Normschiene

Faltwand RFW säulenmontiert



Edelstahlsäule für Faltwand

Ideal überall dort, wo ein Wandanschluss
nicht möglich ist. Edelstahlsäule in der
Dimension 5 x 5 cm.

In 3 Höhen lieferbar.

| | |
|----------|------------------------------|
| RFW-ES4 | Höhe 145 cm, Gewicht 5,00 kg |
| RFW-ES6 | Höhe 165 cm, Gewicht 5,50 kg |
| RFW-ES8 | Höhe 185 cm, Gewicht 6,20 kg |
| Faltwand | Beschreibung siehe Seite 30 |



Edelstahlsäule max. mit 4 Faltwänden
bestückbar



Faltwand RFW - mit Fahrgestell



Scannen

Füllmaterial:
blickdicht
aber licht-
durchlässig

blickdichte,
360°
Scharniere

10 JAHRE
Garantie
auf
Scharniere



Faltwand RFW mit Fahrgestell: Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfallen und wegrollen – so einfach wie die Handhabung ist die Pflege der leicht zu reinigenden Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat.



Fahrgestell für Faltwand

Die fahrbare Version mit max. 10 Flügeln ermöglicht den mobilen Einsatz. Bitte beachten: fahrbare Faltwände nur in den Höhen 145 und 165 cm

| | |
|----------------|---|
| RFW-FG4 | Höhe 145 cm, Gewicht 14 kg |
| RFW-FG6 | Höhe 165 cm, Gewicht 15 kg |
| Fahrgestellfuß | 52 x 59 cm |
| Faltwand | Beschreibung und Abschirmlänge siehe Seite 30 |

Hinweis:
An ein Fahrgestell montiert, ist die Faltwand nur fahrbar. Eine Umsetzung an Wand bzw. Geräteschiene oder Säule ist damit nicht möglich.



29 Farben
21 Designs
siehe Seite 34-35



Für eine bequeme Handhabung – ausgeklügelte Details wie feststellbare Rollen und Hebemechanik



Faltwand RFW 29 Farben

Farben und Designs auf Option

| | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | |
| 01 Goldgelb | 02 Badtürkis | 03 Nelkenrot | 04 Klarblau | 05 Kupferbraun |
| | | | | |
| 06 Vespagelb | 07 Opaltürkis | 08 Rotgrau | 09 Pariserblau | 10 Melonenrot |
| | | | | |
| 11 Aprikosencreme | 12 Clowngrün | 13 Tüllviolett | 14 Madonnablau | 15 Apricotorange |
| | | | | |
| 16 Milchsterweiß | 17 Bergseehelltürkis | 18 Rosenholzapricot | 19 Blaugrau | 20 Mohairmauve |
| | | | | |
| 21 Nilgrün | 22 Markergrün | 23 Saharalichtrot | 24 Bermudablau | 25 Sanftgreige |
| | | | | |
| 26 Nebelgrau | 27 Hellpistazie | 28 Pfefferweiß | 29 Altweiß | 30 Standard weiß transluzent |

Standard:
weiß transluzent
(ohne Aufpreis)

Faltwand RFW 21 Designs

| | | | |
|------------|------------|--------------|------------|
| Struktur | | | |
| | Brightwood | Darkwood | Abstract |
| | Floral | | |
| Ginkgo | | Yellowpalm | Dandelion |
| | | | |
| Wildplants | Pivoine | Papillion | |
| Landschaft | | | |
| | Meadow | Lavender | Leaves |
| | | | |
| Relaxbeach | Heron | Town | |
| Kinder | | | |
| | Flamingo | Bananaplants | Dreambeach |
| | | | |
| Dino | Space | Submarine | |

Gestalten Sie Ihre Wunsch-Faltwand jetzt bequem online:

<https://ropimex.com/konfigurator/>

Farben in Anlehnung an RAL D2, Farbabweichungen produktionsbedingt möglich.

Butterfly-Faltwand Modell RBF

Füllmaterial:
blickdicht
aber licht-
durchlässig


blickdichte,
360°
Scharniere

10 JAHRE
Garantie
auf
Scharniere




2 Formate erhältlich

RBF

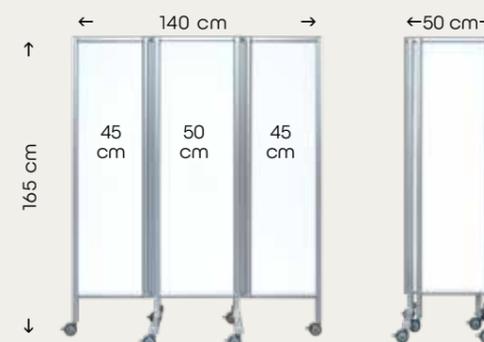

Gewicht: 15,20 kg

RBF200

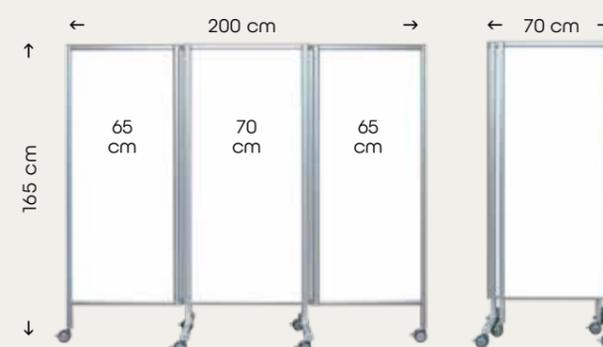

Gewicht: 18,00 kg

ropimex® Butterfly Faltdwand RBF

3-Flügelig, mit mittig auf Doppel-Querfuß zentriertem Flügel und beidseitig um 360° drehbaren Flügeln

| | |
|----------|---|
| Material | Alu-Designprofile, natur-eloxiert mit Polycarbonat-Füllplatten, desinfizierbar, schwerentflammbar, extrem schlagzäh, Kunststoffteile aus Polyamid, hellgrau, Kunststoffrollen Ø 65 mm, feststellbar |
| Farben | Standard weiß, transluzent. Optional 29 Farben, 21 Designs |



Butterfly Faltwand RBF / RBF 200 **29** Farben

Farben und Designs auf Option



Standard:
weiß transluzent
(ohne Aufpreis)

Butterfly Faltwand RBF / RBF200 **21** Designs

Struktur

Floral

Landschaft

Kinder



Gestalten Sie Ihre Wunsch-Faltwand jetzt bequem online:



Farben in Anlehnung an RAL D2, Farbabweichungen produktionsbedingt möglich.

Paravent Butterfly Modell RBP

blickdichte,
360°
Scharniere

10 JAHRE
Garantie
auf
Scharniere





← Feststellbare Rollen



Bespannung:
staph CHEK



In drei Formaten erhältlich

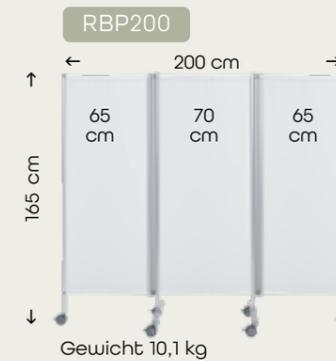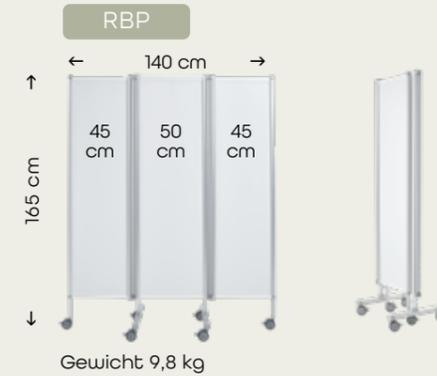

ropimex® Paravent Butterfly RBP

3-Flügelig, mit mittig auf Doppel-Querfuß zentriertem Flügel und beidseitig um 360° drehbaren Flügeln

| | |
|------------|--|
| Material | Rahmen: Alu-Designprofile, eloxiert, Fuß- und Abdeckkappen aus Polyamid, hellgrau. Optional: Kunststoffrollen, Ø 65 mm feststellbar |
| Bespannung | Standardbespannung staph CHEK. staph CHEK-Gewebe ist antimikrobiell, schwerentflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig. Es muss nicht gewaschen werden. Flecken werden mit Tuch, Reiniger und Desinfektionsmittel einfach abgewischt. Gegen Aufpreis mit ropitex-Bespannung erhältlich |
| Farben | weiß, hellblau, gelb, beige, mint |

Empfohlene Vorhänge

siehe ab Seite 23

VHC staph CHEK




Leichtparavent Modell RLP

blickdichte,
360°
Scharniere

10
JAHRE
Garantie
auf
Scharniere



Bitte beachten Sie: Paraventflügel müssen immer im Winkel zueinander stehen, sofern kein ropimex®-Standfuß (Modell RLP/C) eingesetzt wird siehe Seite 45.

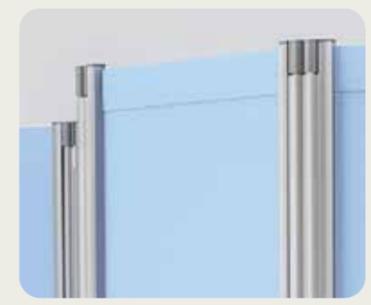

ropimex®-Leichtparavents überzeugen durch die leichte Handhabung. Mit den 360° blickdichten Scharnieren lässt sich jeder Flügel in die gewünschte Position bringen. Bespannung ohne Faltenwurf.



ropimex® Leichtparavent RLP

| | | |
|------------|---|---|
| Material | Rahmen: Alu-Designprofile, eloxiert, Fuß- und Abdeckkappen aus Polyamid, hellgrau. Optional: Kunststoffrollen, schwarz | |
| Bespannung | <p>Standardbespannung staph CHEK. staph CHEK-Gewebe ist antimikrobiell, schwerentflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig. Es muss nicht gewaschen werden. Flecken werden mit Tuch, Reiniger und Desinfektionsmittel einfach abgewischt. Gegen Aufpreis mit ropitex-Bespannung erhältlich</p> | <p>Empfohlene Vorhänge siehe Seite 23</p> |
| Farben | weiß, hellblau, gelb, beige, mint | |






Standfuß zur Stabilisierung der Leichtparavents Modell RLP/C



Standfuß RLP/C



zur Aufnahme von bis zu 4 Paravents

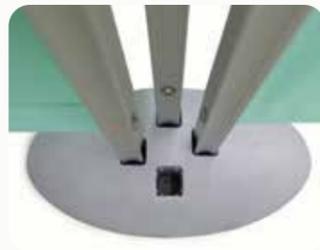

3 Paravents im Standfuß





4 Paravents im Standfuß



Paravents in Reihe als Leitsystem

ropimex® Standfuß Für Leichtparavents

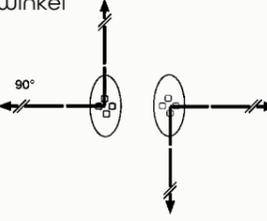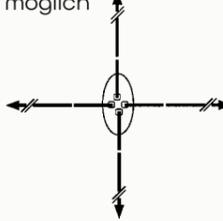

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| Modell RLP/C | Standfuß zur Stabilisierung des Paravents bei gestreckter Aufstellung (Ausnutzung der offenen Breite) und/oder zur Aufnahme mehrerer Paravents (max. 4 pro Standfuß), als Abtrennung oder zum Aufbau eines Leitsystem | | |
| Material | Glasfaserverstärktes Polyamid (GFK) | | |
| Maße/Gewicht | 8 x 15 x 30 cm (H x B x T), Gewicht 1,3 kg | | |
| Variationen | 1 Paravents in Linie  | 1 Paravents im rechten Winkel  | bis zu 4 Paravents möglich  |

Leichtparavents zur Wandmontage Modell RLP/W



ropimex® Leichtparavent RLP mit Wandanschluss

| Modell | Flügel | Gewicht | Breite | Höhe |
|--------|--------|---------|--------|--------|
| RLP/W2 | 2 | 3,8 kg | 100 cm | 165 cm |
| RLP/W3 | 3 | 5,7 kg | 150 cm | |
| RLP/W4 | 4 | 7,6 kg | 200 cm | |
| RLP/W5 | 5 | 9,5 kg | 250 cm | |

Zubehör

| | | |
|---------|--|---|
| RLP-WA | Abstandhalter-Set (2 Stück) für Wandbefestigung, Standardabstand 100 mm, Sonderlänge nach Maßangabe bis 400 mm möglich |  |
| RLP-KLS | Klauenset (2 Stück) zur Befestigung an doppelläufiger Normschiene |  |
| RLP-ES | Standsäule aus Edelstahl für RLP/W zur Montage frei im Raum, Höhe 1.650 mm |  |

Duschspritzschutz Teleskopkabinen

Modell **RDSE/RDLE/RDTE**

Modell **RKLE**

Wandhalter
WH/F, WH 95 siehe S.15



Vorhangringe
im Lieferumfang
enthalten. Farbe grau.



Teleskopkabine

Mit diesem platzsparenden Modell schaffen Sie sich in Sekundenschnelle eine Abschirmung zum Waschen oder Umkleiden entweder als Eck- oder U-Lösung.

| Ecklösung | | empfohlene Wandhalter |
|-----------|---|--------------------------|
| | | |
| RKLE 1212 | Teleskopkabine, max. 120/115 cm, min. 75/70 cm | WH 95 oder WH/F |
| RKLE 1515 | Teleskopkabine, max. 150/145 cm, min. 90/85 cm | |
| U-Lösung | | empfohlene Wandhalter |
| | | |
| RKAE 1.2 | Teleskoparm in Verbindung mit RKLE 1212 zur Schaffung einer U-Kabine 120x115x120 cm | 2 x WH/F |
| RKAE 1.5 | Teleskoparm in Verbindung mit RKLE 1515 zur Schaffung einer U-Kabine 150x145x150 cm | |



Duschspritzschutz

| Modell | Teleskopauszug | empfohlene Wandhalter |
|--------|---|--------------------------|
| | | |
| RDSE | Spritzschutzarm schwenkbar und abknickbar, Auslage 100 cm | empfohlene Wandhalter |
| RDTE | Spritzschutzarm teleskopisch, schwenkbar, Auslage 95 cm | |
| RDLE | Spritzschutzarm L- Form, rechts- und linksseitig erwendbar, seitlicher Schenkel 25 cm, schwenkbar und abknickbar, Auslage 95 cm | WH 95 oder WH/F |



Empfohlene Vorhänge für Nasszellenbereich: CQ, VH/C siehe S. 23 -24

CQ Cleanique VHC staph CHEK



Empfohlene Vorhänge für Umkleidekabinen: RTX siehe S. 22

RTX ropitex



ropimex® überzeugende Produktqualität für höchste Kundenzufriedenheit

ropimex® Geschäftsbereiche am Standort Neunkirchen



ropimex® Sichtschutz

Sichtschutzsysteme
Für den
medizinischen Bereich



ropimex® Schallschutz

Sicht- und Schallschutzsysteme
Für den Officebereich



ropimex® Chemicals

Desinfektionsmittel,
Veredelung,
Mücken- und Zeckenschutz
Ökologische Reinigungsmittel



Zufriedene Kunden in aller Welt



Seit 1976 beschäftigt sich ropimex® mit Lösungen zum Schutze der Intimsphäre von kranken und pflegebedürftigen Menschen.

Die Teleskope der ersten Stunde sind noch heute im Einsatz. Aus den Anfängen heraus entwickelte sich ein System, das in seiner Vielfalt, seinen Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten für jeden Kunden eine passende Lösung bietet.

All diese Eigenschaften, beste Beratung durch autorisierte Fachhändler und schnellste Lieferung sichern ropimex® bis zum heutigen Tage zufriedene Anwender in über 60 Ländern auf allen Kontinenten.



ropimex® Unser Engagement



Ökologisch / nachhaltig

- ropimex®- Produkte sind zu 98 % deutschen Ursprungs und werden zu 100 % am Standort in Neunkirchen/Saar gefertigt.
- konsequentes Recycling unserer Abfälle wie Aluminium, Stoffreste, Pappe, Kunststoff
- wir schränken unseren Papierverbrauch stark ein.
Ziel: papierloses Büro
- sukzessive Umrüstung stromintensiver Verbraucher
- unsere Produkte sind phthalatfrei



Baum-Pate – ropimex® unterstützt Aufforstungsprojekt von PLANT-MY-TREE®



Sozial

- Wohlbefinden ist eine Priorität. Wir investieren gerne in das Umfeld des Unternehmens
 - ob geräumige, offene Büros mit moderner Ausstattung,
 - freundliche Gemeinschaftsräume,
 - flexible Arbeitszeiten oder
 - Home-Officedank dieser praktischen Maßnahmen ist der Krankenstand niedrig, die Fluktuationsrate quasi bei null.



Engagement

Von dem, was wir erwirtschaften, sollen auch diejenigen profitieren, die nicht oder nur eingeschränkt am Leistungsprozess teilhaben können. So engagieren wir uns seit Jahren als Partner bei der Lebenshilfe und anderen, insbesondere jugendfördernden Maßnahmen.

- Partner-Unternehmen 2024 - Ropimex R. OPEL GmbH unterstützt die Arbeit von ÄRZTE OHNE GRENZEN mit einer Spende.
ÄRZTE OHNE GRENZEN leistet weltweit medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten und nach Naturkatastrophen. Die internationale Organisation hilft schnell, effizient und unbürokratisch – ohne nach Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung der betroffenen Menschen zu fragen.
Weitere Infos unter: www.aerzte-ohne-grenzen.de



Medizinprodukt

ropimex® Produkte entsprechen den Anforderungen an die regulatorischen Vorgaben für Medizinprodukte.

Die Systeme sind so ausgelegt, dass für nahezu jede vorhandene Gegebenheit eine Patientenzone-/ Intimzone geschaffen werden kann - stationär oder mobil.

ropimex® Sichtschutzsysteme sind das individuell anpassbare Zubehör für Medizinprodukte wie Patientenbetten, Behandlungsliegen und Behandlungstühlen in medizinischen Einrichtungen.



Zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015

Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen ROPIMEX R. OPEL GmbH, Bildstocker Str. 12-14, 66538 Neunkirchen für den Geltungsbereich Herstellung und Vertrieb von Sichtschutz- und Schallschutzelementen **ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet**. Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 707145152, wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Weiter für den Geltungsbereich Herstellung und Vertrieb von Sichtschutz- und Schallschutzelementen sowie von Biozidprodukten, Desinfektionsmitteln und Beschichtungssystemen **ein Umweltmanagementsystem eingeführt hat und anwendet**. Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der DIN EN ISO 14001:2015 erfüllt sind.



Zu Ihrer Sicherheit

ropimex®-Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards.

Sichtschutz Systeme

Gesundheitswesen | 2025



Teleskope | Teleskoparme | Teleskopkabinen | Mobilschirme | Vario-Schienensystem
Vorhänge | Faltwände | Paravents | Duschspritzschutz



Scannen

ROPIMEX R. OPEL GmbH
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen
Tel. +49 6821 9 12 77-0
info@ropimex.com · www.ropimex.com



ropimex[®]
Seit 1976