

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch



senectovia®




3 in 1 System

SenPro 3

senectovia medizinaltechnik

Produktmerkmale

- Taste für maximale Füllung der Matratze vereinfacht die Pflege. Nach 20 Minuten schaltet das SenPro3 automatisch in den zuvor eingestellten Modus zurück.
- 3 in 1 System, das heisst, 1 Zelle ist entleert und 2 Zellen gefüllt. Dadurch erreicht man eine sehr gute Druckentlastung, kombiniert mit hohem Patientenkomfort.
- Grosszelliges Wechseldrucksystem bestehend aus 17 modular aufgebauten 130 mm hohen Luftzellen aus reinem Polyurethan (PU) und einer eingenähten 50 mm hohen Schaummatratze.
- 3 statische Zellen im Kopfbereich.
- Angenehmes Mikroklima durch 9 laserperforierte Zellen (Luftstromkissen) im Rücken- und Gesässbereich.
- Integrierte Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung.
- Antiallergener Bezug aus Soft-Care-TEX™: Atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig, Reibungs- und Scherkräfte werden minimiert, hoher Liegekomfort durch die sehr weichen und angenehmen Eigenschaften des Bezuges.
- Umlaufender Reissverschluss mit Abdeckung zur sicheren Fixierung des Bezuges und Schutz gegen Verunreinigung der Luftkammern.
- CPR-Lasche zur einfachen und schnellen Entlüftung bei Reanimation.
- Nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb der Steuereinheit mit «Soundless-Air-Room-Technologie™».
- Sichere Verbindung von stahlfederverstärkten Luftzufuhrschläuchen und Motor durch spezielle Konnektoren.
- Einfache Einstellung der Patientengewichte von 20 bis 140 kg.
- Anzeige des Betriebszustandes durch farbige Leuchtdioden.
- Optischer Alarm bei zu niedrigem Druck.
- Luftbefüllt sind die Luftzellen 130 mm hoch.
- Durch die vergrösserte Auflagefläche erreicht die SenPro3 eine effektive und optimale Druckentlastung.
- Verbesserte elektrische Sicherheit für Patienten und Anwender durch hochwertiges EPR-Netz Kabel.

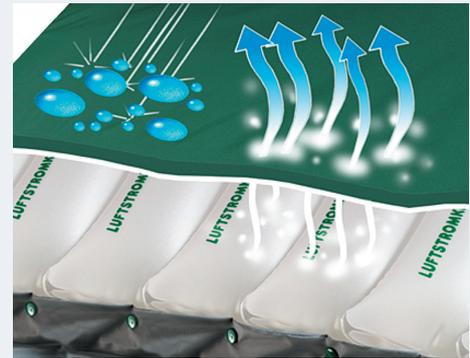

TECHNISCHE DATEN

Matratze

Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 20 Watt
Zyklus: 3 in 1

Abmessungen:
– Aggregat (HxBxT): 250 x 300 x 130 mm
– Auflage (LxBxH): 2000 x 900 x 180 mm
Auf Wunsch in verlängerter Ausführung
erhältlich (2200 mm)

SenPro3



senectovia®

senectovia
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40
www.senectovia.ch info@senectovia.ch



CE