




Suprasorb® H

Hydrokolloid-Verband

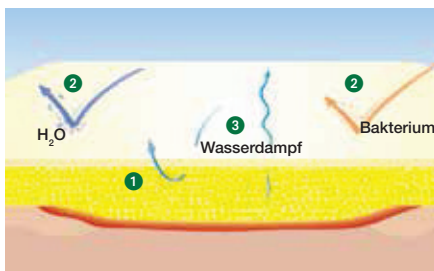

- 1 bei Exsudataufnahme quillt das Hydrokolloid und bildet ein Gel, das Exsudat und Gewebetrümmer bindet
- 2 bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- 3 überschüssiger Wasserdampf verdunstet

Anwendungsbereiche

- mittel exsudierende Wunden (Suprasorb H standard, sacrum, border)
- schwach exsudierende Wunden (Suprasorb H dünn)
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung z. B.:
 - Ulzera verschiedener Genese
 - Verbrennungen 2. Grades
 - Spalthautentnahmestellen
 - postoperative Wunden

Eigenschaften

- sehr gute Wundheilung durch gutes Exsudatmanagement
- hoher Komfort durch einfache Applikation
- besonders dünn und flexibel
- bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- Duschen ist möglich

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und möglichem Primärverband festgelegt, spätestens nach 5-7 Tagen. Bei ausgeprägter Blasenbildung über die Wundfläche hinaus muss der Verband gewechselt werden.

Ausführungen

- standard
- dünn
- sacrum
- border

Empfohlene Kombinationen

- Suprasorb A, Suprasorb C, Suprasorb G Amorphes Gel, Kompressionstherapie

Tipp

- Speziell zur Versorgung des Diabetischen Fussyndroms gibt es Suprasorb H dünn in der Grösse 5 x 5 cm

Suprasorb® H Hydrokolloid-Verband steril, einzeln eingeschelt

Grösse (cm)	REF	Pharmacode	VE (Stk.)
standard			
10 x 10	20 403	314 717 5	10 / 660
15 x 15	20 401	218 774 1	5 / 50
20 x 20	20 402	218 773 5	5 / 50
dünn			
5 x 5	20 424	346 915 7	10 / 1650
5 x 10	20 410	218 784 7	10 / 480
5 x 20	20 411	218 785 3	10 / 250
10 x 10	20 412	218 787 6	10 / 720
15 x 15	20 413	218 788 2	5 / 50
20 x 20	20 414	218 789 9	5 / 50
sacrum			
14 x 16	20 430	218 791 3	5 / 200
border			
14 x 14	20 420	218 790 7	5 / 200