

Vario 18



VIELSEITIG UND EFFIZIENT

Distributed by
puras
031 996 85 85
puras.ch



Vario 18 Absaugpumpe

Vario 18

Vielseitiges und effizientes Absaugen

Vario 18 ist eine effiziente medizinische Absaugpumpe und vielseitig einsetzbar in Krankenhäusern, Kliniken und bei der Pflege zuhause. Die Absaugpumpe zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Laufruhe und Mobilität aus. Der innovative QuatroFlex-Antrieb ermöglicht eine einfache Wartung.

Die **Vario 18** kann, gemäß den Bedürfnissen und Ansprüchen des Kunden, entweder mit einem Einweg- oder Mehrweg-Auffangsystem verwendet werden.

Die **Vario 18** steht für Schweizer Präzisions- und Qualitätsarbeit und bietet eine Reihe nützlicher Eigenschaften.



- a** Überlaufschutz-/Bakterienfilter
- b** Manometer in kPa und mmHg
- c** LED-für Akkustatus
- d** Tragegriff
- e** Membran-Vakuumregler
- f** Schlauchhalter
- g** Anschluss für 12 VDC IN
Autoanschlusskabel

Einzigartige Schweizer Technologie

Das innovative 4-fache Kolben-/Zylinder System, QuatroFlex, baut das Vakuum innerhalb weniger Sekunden auf und überzeugt durch seine kompakte Größe und Laufruhe während des Betriebs. Es besteht nicht nur durch sein einzigartiges Design und Technologie, sondern auch durch die leichte Instandhaltung und Wartungsfreundlichkeit, weshalb es von Medizintechnikern sehr geschätzt wird. Mit dem Membran-Vakuumregler ist eine präzise Vakuumeinstellung möglich: Zum Ändern des Vakuums muss er gedrückt werden, wodurch versehentliche Änderungen der Einstellung nicht möglich sind. So kann die Vario 18 von Medela auch direkt am Patientenbett verwendet werden.



Präzise Vakuumeinstellungen mit Verstellsicherung

Vielseitige Anwendung

Die leichte und tragbare Vario 18 kann in verschiedenen Abteilungen in Krankenhäusern und Kliniken sowie zu Hause eingesetzt werden. Diese Pumpe ist auch ideal bei kleinen chirurgischen Eingriffen und für die Atemwegsabsaugung. Mit dem Membran-Vakuumregler können Sie einfach verschiedene Vakuumstärken einstellen. Die Vario 18 kann entweder mit einem Einweg- oder einem Mehrweg-Auffangsystem ausgerüstet werden.



Optimale Hygiene für zahlreiche Anwendungen

Hygienische und einfache Handhabung

Die Vario 18 ist einfach und intuitiv zu bedienen. Das Zubehörsortiment ist auf die Pumpe abgestimmt. Fehlanschlüsse werden vermieden. Es umfasst ein Rollstativ, eine Tragetasche und verschiedene Halterungen sowie ein integriertes Akkuladegerät, das die mobile Nutzung ermöglicht. Akustische und visuelle Signale zeigen an, wann der Akku geladen werden muss.



Kann für die individuelle Anwendung ausgerüstet werden

Kurzinformationen

- Medizinische Fachkräfte profitieren von Medelas 50-jähriger Erfahrung in der medizinischen Vakuumtechnologie.
- Unser Schweizer Entwicklungs- und Herstellungsprozess zeichnet sich durch mechanische Präzision aus und garantiert exzellente Leistung.
- QuatroFlex-Technologie: kann dank seiner Laufruhe in Umgebungen eingesetzt werden, in denen ein ruhiger Betrieb erforderlich ist.
- Präzise Vakuumanpassung und schneller Vakuumaufbau: sofort einsatzbereit.
- Ein Gerät für viele Anwendungen.
- Neue Benutzer benötigen nur wenige Anweisungen.
- 30 Minuten netzunabhängiger Betrieb.
- Akustisches und optisches Akkumanagement.
- Breite Zubehörpalette für individuelle Anwendungen verfügbar.
- Die Vario 18 erfüllt die gleichen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit wie die Medela-Absaugpumpen für den Operationssaal.
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät.

Zubehör

Filter

schützen die Pumpe vor Überlauf, das Umfeld vor Bakterien und neutralisieren Geruch.



Rollstativ

mit Normschienen - macht Pumpe und Zubehör mobil.



Mehrweg-Auffangsystem

Autoklavierbare Behälter mit Deckel fangen Sekrete einfach und effizient auf. Erhältliche Größen: 1 und 2 Liter.



Klemmen und Halterungen

können zur Befestigung der Vario 18 Absaugpumpe an Normschienen verwendet werden.



Einweg-Auffangsystem

mit Einweg-Sekretbeuteln und Mehrweg-PC-Behältern für eine hygienische, einfache Handhabung und ein effizientes Flüssigkeitsmanagement. Verfügbare Größen: 1,5 und 2,5 Liter.



Tragetasche

zum Transportieren der Pumpe.



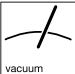

Verwenden Sie Medela Zubehör für noch mehr Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit.

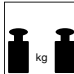
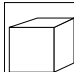
Anschluss für 12 VDC IN Autoanschlusskabel

zum Betrieb der Pumpe im Auto.



Technische Daten

	High vacuum -75kPa -563 mmHg
	Low flow 18 l/min.

	AC 3,5 kg AC/DC 4,2 kg
	H x B x T 380 x 170 x 285 mm

	IP21
	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EEC), IIa 2 Jahre Garantie
	CE 0123

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren örtlichen Medela Fachhändler.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland
www.medela.com

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 (0)89 31 97 59-0
Fax +49 (0)89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Örtlicher Fachhändler:



Medela AG
Medical Technology
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch