



Zetuvit® Plus, die Wundauflage Nr. 1 für stark exsudierende Wunden.**3

Zetuvit® Plus ist besonders geeignet für die Behandlung oberflächlicher, stark exsudierender akuter oder chronischer Wunden wie Dekubitus, Beinulzera und ulzerierende Tumoren.

Handelsform	Grösse (cm)	Artikelnummer	Packungsinhalt	MiGeL	Pharmacode
Zetuvit Plus	10 x 10	413 710	10	35.05.05.03.1	3649103
	10 x 20	413 711	10	35.05.05.04.1	3649126
	15 x 20	413 712	10	35.05.05.04.1	3649132
	20 x 25	413 713	10	35.05.05.05.1	3649149
	20 x 40	413 715	10	35.05.05.06.1	6971816

NEU



847331 (06/18)

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Brunns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen

+41 52 674 31 11
+41 52 672 74 41
info@ivf.hartmann.info
ivf.hartmann.info

References
** Compared to 10 competitor products and based on EN 13726-1 chapter 3.2 and modified from SMTL TM-404
1 D. Kaspar. Dealing effectively with heavily exuding wounds – Zetuvit Plus tested in clinical practice. Publication 2007, PAUL HARTMANN AG/Heidenheim, Germany
2 Data on file (Specification number P6.1203)
3 Data on file (Performance Data)
4 Data on file (Research Results Zetuvit Plus Product Test)
5 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Wound exudate and the role of dressings. A consensus document. London: MEP Ltd, 2007
6 Data on file (J.Linder, Zetuvit Plus cost-efficiency calculations based on technical data for England and Germany)



Profitieren Sie von einem leistungsstarken Exsudatmanagement

NEU



Die meistverwendete superabsorbierende Wundauflage Europas*

Setzen Sie auf überlegene Stärke. Setzen Sie auf **Zetuvit® Plus**



* Verordnungen laut Apothekenkatalog von 2015


Lernen Sie das neue Zetuvit® Plus kennen: Schicht für Schicht eine überzeugende Lösung für stark exsudierende Wunden.



- 1. Weiches Aussenvlies** – Leitet das Exsudat schnell in das Innere der Auflage und beugt das Verkleben mit der Wunde vor.^{1,2}
- 2. Diffusionsschicht** – Sorgt für eine homogene Verteilung des Exsudats im extrastarken Saugkern für ein optimales Exsudatmanagement.¹
- 3. Leistungsfähiger Superabsorber** – Absorbiert und bindet Flüssigkeit sicher, auch unter Druck. Bietet einen hervorragenden Polstereffekt.¹
- 4. Grüne, wasserabweisende Aussenschicht** – Schützt Kleidung und Bettwäsche und ist luftdurchlässig.²

Zetuvit® Plus ist die meistverwendete superabsorbierende Wundauflage in Europa* und übertrifft Mitbewerberprodukte als Wundauflage Nr. 1 für stark exsudierende Wunden.**

Absorption und Retention einer Blutersatzlösung
g/100 cm² pro Kissen

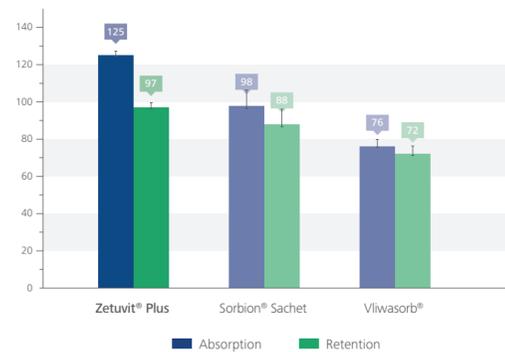

*Zetuvit® Plus ist stark absorbierend und bindet das Exsudat. Es kam zu keiner Mazeration.^{***4}*

Auch bei der Absorption unter Druck besser als die Mitbewerber.³

Testverfahren:

Freie Absorption: 30 Min. nach EN 13726-1 Kapitel 3.2 / Retention: Testverfahren modifiziert gegenüber SMTL TM – 404 / Blutersatzlösung = 0,9% NaCl, 7% Proteine g/g)

* Verordnungen laut Apothekendaten von 2015

** Verglichen mit 10 Mitbewerbern und durchgeführt nach EN 13726-1, Kapitel 3.2 sowie modifiziert gegenüber SMTL TM-404

*** Aussage eines Nutzers während des HARTMANN Nutzer-und-Patienten-Tests 2016, n = 158

Sicher, effizient und bequem. Zetuvit® Plus lässt Sie nicht im Stich.

Sicherheit und Komfort Ihrer Patienten stehen an erster Stelle.
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit **Zetuvit® Plus** und sparen Sie Zeit und Kosten.

- **Hohe Sicherheit** – Die hohe Aufnahme- und Retentionskapazität sorgen für hervorragendes Exsudatmanagement ohne Mazeration⁵, während die wasserabweisende Aussenschicht die Bettwäsche und Kleidung schützt.^{2,4}
- **Kosteneffizient und zeitsparend**⁴ – Dank der hohen Aufnahme- und Retentionskapazität sind weniger Verbandwechsel nötig¹, was zu einer nachgewiesenen Kosteneffizienz führt.⁶
- **Höchster Tragekomfort** – Angenehm und bequem zu tragen dank weicher Materialien und hoher Geschmeidigkeit, was von über 90 % der Patienten bestätigt wurde.¹
- **Verbesserte Lebensqualität** – Zetuvit Plus beugt das Verkleben mit der Wunde vor und die hohe Aufnahmekapazität erhöht die Tragedauer.¹ Die Geruchsbildung wird gehemmt oder ganz vermieden.⁴

*Zetuvit® Plus:
Stark und beständig
für eine längere
Tragezeit^{1,4}*