



Sterile Einmal-Lanzetten

Zur effizienten und komfortablen Gewinnung von Kapillarblut

Praktisch schmerzfrei

Die hochwertig polierte, dreifach abgeschrägte Nadelspitze mit besonders glatter Oberfläche und extrem scharfer Spitze ermöglicht eine sanfte Blutproben-gewinnung bei maximalem Komfort. Zudem beträgt der Durchmesser der mylife™ Lancets nur 30G.




mylife™ Lancets
(150-fache Vergrößerung)




Lanzetten anderer
Hersteller
(150-fache Vergrößerung)

Freie Nadellänge


Die Nadel ist perfekt positioniert, um eine konsistente Nadelkonzentrität und freie Nadellänge sicherzu-stellen.

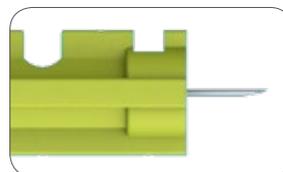


Geeignet zur Verwendung mit mylife™ Softlance

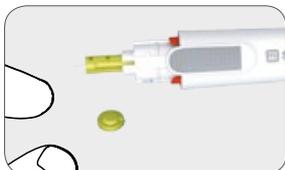

1. mylife™ Softlance Lanzetten-gerät und mylife™ Lancet nach der Verwendung.

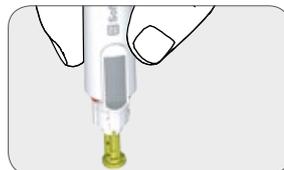

2. Zur Verhinderung von Stichverletzungen wird die Lanzette einfach in die Lanzettenschutzkappe gesteckt.

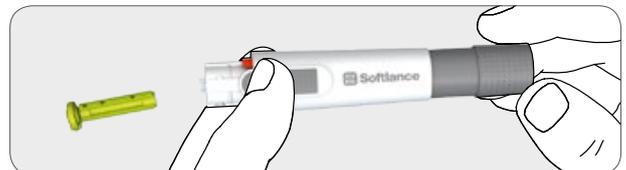


3. Hygienisches und sicheres Auswerfen der Lanzette ohne Hautkontakt. Die gebrauchte Lanzette in einem geeigneten, stichfesten oder Sondermüllbehälter entsorgen.



Geeignet zur Verwendung mit mylife™ AutoLance™



1. Das mylife™ AutoLance™ Lanzettengerät mit automatischer Lade- und Auslösefunktion.

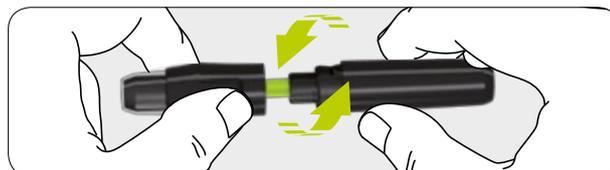

2. Praktischer Bajonetverschluss mit automatischer Stoppfunktion für einfachen Lanzettenwechsel.



3. Zur Verhinderung von Stichverletzungen wird die Lanzette einfach in die Lanzettenschutzkappe gesteckt. Sichere Entsorgung nach der Verwendung.




mylife™ Lancets – hochwertiges Sortiment

Ideal für Erwachsene und Kinder

mylife™ Lancets

Hochwertige Lanzetten für den täglichen Gebrauch, die einen optimalen Blutfluss gewährleisten. Spezialdesign zur einfachen und komfortablen Blutprobengewinnung.

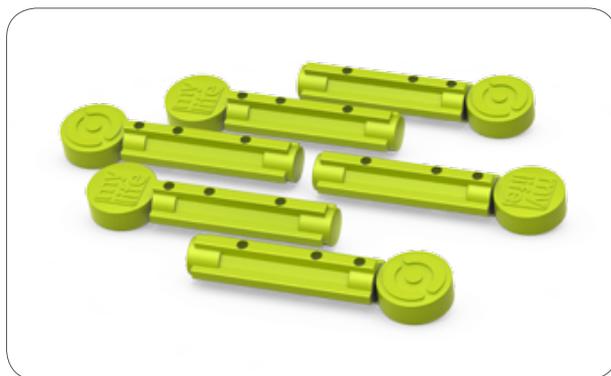

mylife™ Lancets multicolor

Die gleiche Funktion wie bei den mylife™ Lancets, aber in sieben verschiedenen Farben erhältlich.



Sterilität bleibt 5 Jahre lang erhalten

Sterilisierende Dosis gemäß ISO 11137-2:2012 festgelegt

Best. Nr.	Menge	Beschreibung	Gauge	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Außendurchmesser
7101030	200 Stk	mylife™ Lancets	30G	0.30 ± 0.01mm	3.3 ± 0.3mm	6.3 ± 0.5mm
7101031	200 Stk	mylife™ Lancets multicolor	30G	0.30 ± 0.01mm	3.3 ± 0.3mm	6.3 ± 0.5mm

Deutschland

Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
 info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de // kostenlose Service-Hotline: 0800 50 50 50

Österreich

Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //
 info@ypsomed.at // www.mylife-diabetescare.at // kostenlose Service-Hotline: 00800 50 50 50

Schweiz

Ypsomed AG // Markt Schweiz // Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf //
 info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //
 kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44

